

# mini FLO

Treating hands like flowers



**Fijador Externo  
con aplicación dorsal**



EXTERNAL  
fixation



monolateral  
fixators



hand

## Indicaciones


Indicado para la distracción gradual de la articulación interfalángica y metacarpofalángica en caso de:

- contracturas articulares postraumáticas
- grados severos de la enfermedad de Dupuytren





MiniFlo R25

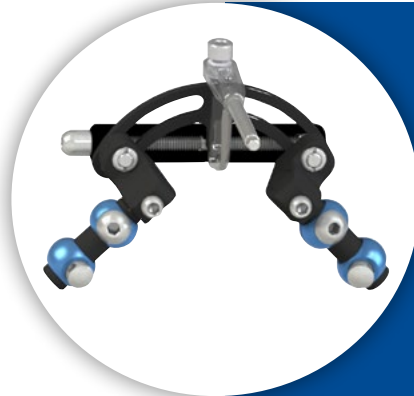

MiniFlo R30



Módulo Offset



Módulo Recto

Características	Beneficios
Fijador con el cuerpo en forma de arco	Fácil aplicación dorsal en la mano
Colocación del dispositivo en correspondencia con el eje de rotación articular	Distracción simétrica gradual sin estresar sus estructuras
Doble función de la llave MiniFlo	Durante la intervención para una colocación correcta del fijador y después de la intervención como llave de distracción
Mecanismo sencillo de distracción	El paciente realiza la distracción tomando como base la tensión del tejido y el grado de dolor
Tornillos óseos estériles disponibles en tres medidas	Versatilidad de uso para las diferentes dimensiones de los huesos
Disponible en dos medidas	Aplicación interfalángica y metacarpofalángica
Módulos telescópicos suplementarios	Permitir una distracción simétrica, evitando la generación de una iperdistracción articular

Código	Descripción	ESTÉRIL	
<b>F4R-1025</b>	Fijador MiniFlo R25 (suministrado con alambre de K. de 1.5 mm y llave hexagonal de 3 mm)		
<b>F4R-1030</b>	Fijador MiniFlo R30 (suministrado con alambre de K. de 1.5 mm y llave hexagonal de 3 mm)		
<b>F4R-2021</b>	Módulo Telescópico MiniFlo Offset (sólo para F4R-1030)		
<b>F4R-2022</b>	Módulo Telescópico MiniFlo Recto (sólo para F4R-1030)		

Tornillo Óseo, longitud total 100 mm, longitud de la rosca 13 mm		ESTÉRIL	
<b>SF32160</b>	Vástago ø2.5 mm, rosca ø1.6 mm		
<b>SF32200</b>	Vástago ø2.5 mm, rosca ø2.0 mm		
<b>SF32250</b>	Vástago ø2.5 mm, rosca ø2.5 mm		